

CERTIFICADO DE AFERIÇÃO



Nº:46

Tipo de serviço	Próxima calibração		Serviço		
CALIBRAÇÃO	X	27/07/2023 até 27/07/2024	Interno	Externo	X

CLIENTE: CURA-CENTRO DE ULTRAS.E RADIOLOGIA S.A.

ENDEREÇO: AV PAVÃO -ATÉ 409/410 Nº322

CEP:4516010

CIDADE: SÃO PAULO

SP

CNPJ/CPF: 50.252.998/0005-13

FONE: ...

EMAIL:nf@cura.com.br

BAIRRO: MOEMA

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: Eletrocardiógrafo

Marca :MICROMED

Modelo: ERGO PC 13

Nº. de Série:0816249

PADRÃO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO:

Calibrador de ECG marca R&D Mediq modelo HS-14 Nº de série: 9823049

Certificado de calibração nº: 400.17833/22 / CERTIFICADOR: CNCiso. Com.de Instrum. De Precisão Ltda.


Calibração realizada em: 21/07/2022

Próxima Calibração em: 21/07/2023

Ensaio 1: - Aferição de ganho e Velocidade do Papel do eletrocardiógrafo.

No eletrocardiógrafo, utiliza-se a derivação DIII, velocidade do aparelho em 25 mm/s e filtros desligados.

Abaixo, modelo de forma de onda gerada pelo Calibrador. Onda quadrada com frequência de 2 Hz e amplitude de 1 mV.

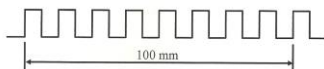Resultado obtido: Onda quadrada com 10 mm de amplitude ± 1 mm.

APROVADO

Ensaio 2: Amortecimento do traçado (Overshoot). Tolerância de 0,5%

APROVADO

Ensaio 3: Rejeição da frequência da rede elétrica 60 HZ.

Calibrador de ECG na função Senóide 60hz, 1mV, Filtros de ECG desligados. Com a mesma forma, ligar o filtro de 60Hz do ECG. A amplitude da onda senoidal de 60Hz deverá ser reduzida para no máximo 30% da onda sem filtro.



APROVADO

Ensaio 4: Linearidade. Utilizar função "A" do calibrador. (Forma de onda triangular, 2Hz)


Verificar nas derivações V (Precordiais) do ECG, se as ondas mostradas são lineares, ou seja, tanto na subida quanto na descida a onda triangular deve apresentar retas sem distorções. Exemplo:



APROVADO

ENSAIO 5: Frequência Cardíaca - Utilizar função 2 do calibrador HS-14. (Simulador de ECG com Frequência = 80 bpm).

Aguardar 20 batimentos para registrar e aferir a frequência Cardíaca que deverá ser de 80 bpm tanto no visor (quando houver), quanto impresso no papel.

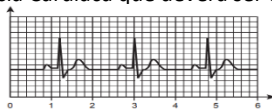

APROVADO

Laudo Técnico

Conclusão do Ensaio: O equipamento foi considerado **APROVADO** após os testes realizados.

Técnico Executor

Walysson da Mota OliveiraAssinado de forma digital por
Walysson da Mota Oliveira
Dados: 2023.07.31 11:20:03
-03'00'

Técnico Responsável

THIAGO CICERO ALVES
JOSE:3343738980
7Assinado de forma digital
por THIAGO CICERO ALVES
JOSE:33437389807
Dados: 2023.07.31
11:36:03 -03'00'

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.

Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP - CEP 01238-010

Telefone / Fax: (011) 2609-7848 - tecnica@cardioequipo.com.br / www.cardioequipo.com.br

ECG de Repouso

FC 80 bpm

Base Rede 32Hz

Unidades: mm/mV

25 mm/s

