

CERTIFICADO DE AFERIÇÃO



Nº:173

Tipo de serviço	Próxima calibração		Serviço		
CALIBRAÇÃO	X	19/10/2023 ATÉ 19/10/2024	Interno	Externo	X

CLIENTE: DR SERGIO GOLDMAN			CNPJ/CPF: 983.124.218.15		
ENDEREÇO: R URUSSUI Nº 300, CONJ:91/92		BAIRRO: ITAIM BIBI	CIDADE: SÃO PAULO		SP
CEP:04542051	FONE: (11) 3078-8320	EMAIL: s-goldman@hotmail.com			

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: Eletrocardiógrafo		
Marca: SCHILLER	Modelo: AT-1	Nº. de Série: 190.719.18


PADRÃO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO:	
Calibrador de ECG marca R&D Mediq Modelo HS-14 Nº de série: 9823049	
Certificado de calibração nº: 400.17988/23 / CERTIFICADOR: CNCiso. Com.de Instrum. De Precisão Ltda.	
Calibração realizada em: 25/07/2023	Próxima Calibração em: 25/07/2024

Ensaio 1: - Aferição de ganho e Velocidade do Papel do eletrocardiógrafo.

No eletrocardiógrafo, utiliza-se a derivação DIII, velocidade do aparelho em 25 mm/s e filtros desligados.


Abaixo, modelo de forma de onda gerada pelo Calibrador. Onda quadrada com frequência de 2 Hz e amplitude de 1 mV.

Resultado obtido: Onda quadrada com 10 mm de amplitude $\pm$ 1mm.

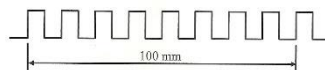

APROVADO

Ensaio 2: Amortecimento do traçado (Overshoot). Tolerância de 0,5%

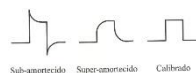

APROVADO

Ensaio 3: Rejeição da frequência da rede elétrica 60 HZ.

Calibrador de ECG na função Senóide 60hz, 1mV, Filtros de ECG desligados. Com a mesma forma, ligar o filtro de 60Hz do ECG. A amplitude da onda senoidal de 60Hz deverá ser reduzida para no máximo 30% da onda sem filtro.



APROVADO

Ensaio 4: Linearidade. Utilizar função "A" do calibrador. (Forma de onda triangular, 2Hz)


Verificar nas derivações V (Precordiais) do ECG, se as ondas mostradas são lineares, ou seja, tanto na subida quanto na descida a onda triangular deve apresentar retas sem distorções. Exemplo:



APROVADO

ENSAIO 5: Frequência Cardíaca - Utilizar função 2 do calibrador HS-14. (Simulador de ECG com Frequência = 80 bpm).

Aguardar 20 batimentos para registrar e aferir a frequência Cardíaca que deverá ser de 80 bpm tanto no visor (quando houver), quanto impresso no papel.

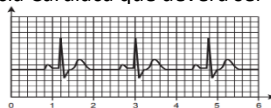

APROVADO

Laudo Técnico

Conclusão do Ensaio: O equipamento foi considerado **APROVADO** após os testes realizados.

Técnico Executor	Técnico Responsável
WALYSSON DA MOTA OLIVEIRA: 06756871366	THIAGO CICERO ALVES JOSE:33437389807
Assinado de forma digital por WALYSSON DA MOTA OLIVEIRA: 06756871366 Dados: 2023.10.19 15:28:08 -03'00'	Assinado de forma digital por THIAGO CICERO ALVES JOSE:33437389807 Dados: 2023.10.19 15:28:24 -03'00'

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.

Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP - CEP 01238-010

Telefone / Fax: (011) 2609-7848 - tecnica@cardioequipo.com.br / www.cardioequipo.com.br

FlukeBiomedical 601ProXL ELECTRICAL SAFETY TEST Date: 19/10/23 Time: 14:32

CONTROL#: 173
DEVICE TYPE: ELETROCARDIOGRAFO
MANUFACTURER: SCHILLER AT-1
SERIAL#: 190.71918
LOCATION: CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA

PROCEDURE ID:
601PRO#: 9722028
TECHNICIAN: WALYSSON MOTA

IEC 601-1 Class II, Type BF

CURRENT CONSUMPTION

0.0 A

MAINS VOLTAGE

L1-Earth : 0.1 V

L2-Earth : 120.2 V

L1-L2 : 120.2 V

ENCL. LEAKAGE CUR. [uA]

NORM POL 6 [100]

NO L2 10 [500]

REV POL 4 [100]

NO L2 10 [500]

Comments: ECG APROVADO NO TESTE DE SEG. ELETRICA

UNIT PASSED