

Relatório técnico

De Calibração

e

Seg. Elétrica

Escopo de Calibração e Segurança Elétrica do Eletrocardiógrafo

1. Procedimentos de Calibração

A calibração verifica a precisão dos sinais registrados pelo eletrocardiógrafo e deve ser realizada periodicamente.

2. Parâmetros Verificados

- **Amplitude do sinal:** Verificação se 1 mV corresponde ao valor correto no traçado.
- **Frequência de resposta:** Teste da resposta do equipamento dentro da faixa de operação.
- **Velocidade do traçado:** Conferência das velocidades configuráveis, como 25 mm/s e 50 mm/s.
- **Verificação de ruído e interferência:** Teste para identificar ruídos que possam afetar a leitura.
- **Teste de integridade dos cabos e eletrodos:** Avaliação da continuidade e resistência elétrica dos acessórios.

3. Procedimentos de Segurança Elétrica

A segurança elétrica previne choques elétricos e interferências que possam comprometer a segurança do paciente e do operador.

4. Ensaios de Segurança Elétrica

- **Corrente de fuga para terra:** Medição para garantir que o equipamento não libera corrente perigosa.
- **Corrente de fuga para o paciente:** Verificação da segurança das derivações conectadas ao paciente.
- **Resistência de isolamento:** Teste da isolação entre os circuitos de entrada e o chassi.
- **Continuidade do aterramento:** Garantia de conexão segura ao aterramento.

5. Ferramentas e Equipamentos de Teste

- Simulador de ECG Digital
- Analisador de segurança elétrica

6. Periodicidade da Calibração e Testes de Segurança

- **Calibração:** Anualmente ou conforme necessidade.
- **Segurança elétrica:** A cada 12 meses ou após manutenção corretiva.

7. Registro e Certificação

Todos os testes devem ser documentados, e um certificado de calibração e laudo de segurança elétrica devem ser emitidos.

**RC-ECG-RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDÍOGRAFO**Nº **2509251274**

Data :	25/09/2025	Hora:	9:44	Sugestão próxima calibração:	25/09/2026
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	24	°C	Humidade relativa do ar:	32	%
Contratante:	Ney Valente			Contato :	
Endereço:	Rua Primeiro de março, 193- V. Clementino-SP			CEP:	4044040
CPF/CNPJ:	698.516.208-82			Cidade/UF:	São Paulo-SP
				E-mail :	valenteney@gmail.com

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Eletrocardiógrafo	Marca:	Dixtal	Modelo:	EP-3
Nº Série:	70308004	Patrimônio:		Classe:	I
				Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :**Simulador de Eletrocardiograma**

Marca: R&D Mediq Modelo: Hand Sim - HS-14 Nº Serie: 9823049
Certificado de calibração nº: 400.17708/25 Data: 21/07/2025 Validade: 21/07/2026
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

Termo Higrômetro

Marca: Minipa Modelo: MT-242 Nº Serie: Não consta
Certificado de calibração nº: 400.17674/25 Data: 14/07/2025 Validade: 14/07/2026
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

Amplitude (Medidas na derivação DIII do Equipamento sob ensaio) :	Esperado mm	Tolerância +ou- mm	Obtido mm	Situação
Função "D" do Simulador de ECG - Onda quadrada 1 mV 2 Hz :	10	1	10	Aprovado
Função "2" do Simulador de ECG - Sinal de ECG derivação DIII :	10	1	10	Aprovado

Frequência (Batimentos por minuto. bpm)	Esperado bpm	Tolerância %	Obtido bpm	Situação
Função "0" do simulador de ECG - Sinal de ECG 30 BPM :	30	5	30	Aprovado
Função "2" do simulador de ECG - Sinal de ECG 80 BPM :	80	5	80	Aprovado
Função "4" do simulador de ECG - Sinal de ECG 240 BPM :	240	5	240	Aprovado

Velocidade de registro :	Esperado mm	Tolerância %	Obtido mm	Situação
25 mm/seg. - Função "2" do Simulador (80BPM) ECG - 8 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado
50 mm/seg. - Função "0" do Simulador (30 BPM) ECG - 4 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Thiago Ferreira da
Costa
CPF-001.136.812-8
3

Assinado de forma digital
por Thiago Ferreira da
Costa CPF-001.136.812-83
Dados: 2025.09.24
09:19:06 -03'00'

THIAGO
CICERO ALVES
JOSE:3343738
9807

Assinado de forma
digital por THIAGO
CICERO ALVES
JOSE:33437389807
Dados: 2025.09.24
09:19:31 -03'00'

Técnico executor

Thiago Ferreira-CPF: 001136812-83

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.

Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - 01238-010 - São Paulo - SP

www.cardioequipo.com.br - Telef.: (11) 2609-7848

CNPJ : 47.577.523/0001-69

Relatório de Teste

Modelo: DIXTAL EP-3

Nro.de Série: 70308004

Data 25/09/2025 Hora 09:44


PADRÃO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO

Calibrador de ECG marca R&D Mediq modelo HS-14 N° de série: 9823049

Certificado de calibração n°: 400.17792/24 / CERTIFICADOR: CNciso. Com.de Instrum. De Precisão Ltda.

Aplicada amplitude na derivação DIII do equipamento sob ensaio

Onda quadrada 1 mV 2 Hz

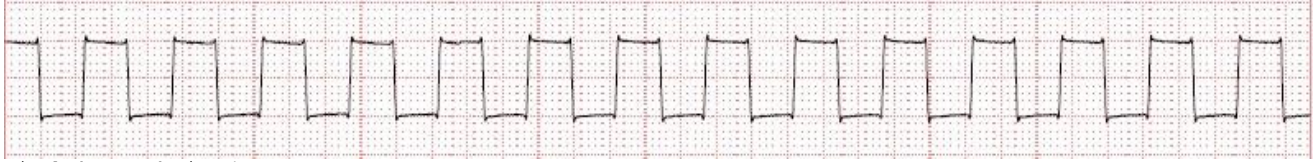

Sinal de ECG derivação DIII




Aplicada frequência (Batimentos por minuto. bpm) sob ensaio

Sinal de ECG 30 BPM



Sinal de ECG 80 BPM

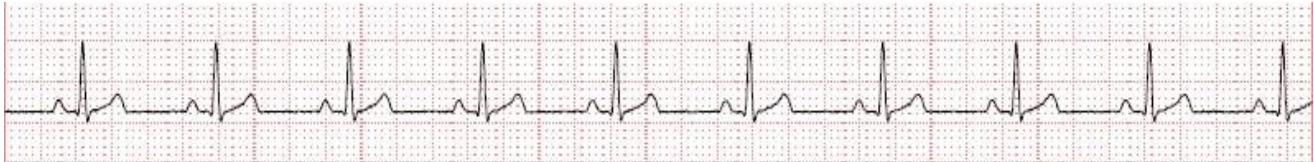


Sinal de ECG 240 BPM




Aplicado velocidade de registro sob ensaio

25 mm/seg. - 8 QRSs Sinal de ECG 80 BPM

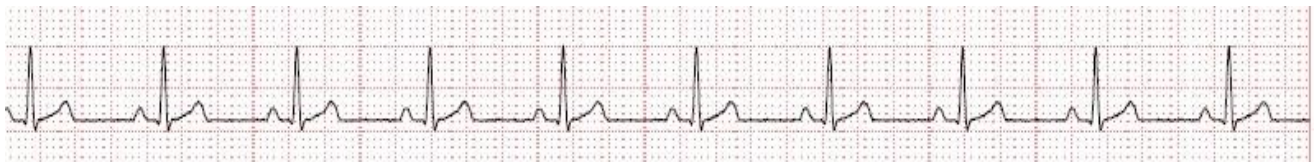

50 mm/seg. - 4 QRSs / Sinal de ECG 30 BPM

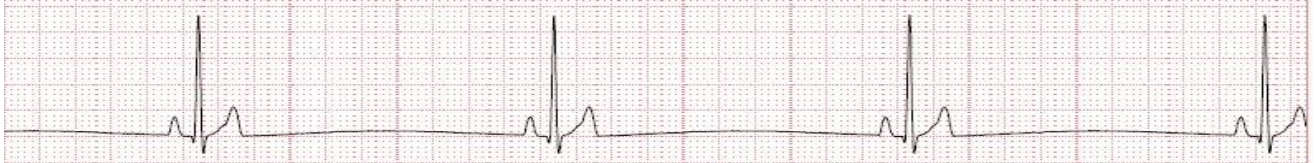

COMENTARIOS: REGISTROS APROVADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO FABRICANTE

CERTIFICADO DE SEGURANÇA ELÉTRICA					Nº		2509251274				
Data :		25/09/2025		Hora:		10:05		Sugestão próximo ensaio :		25/09/2026	
Contratada: Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.					CNPJ: 47.577.523/0001-69						
Endereço: Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP					Insc.Est.: 110.554.143.117						
Temperatura ambiente: 24 °C					Humidade relativa do ar: 34 %						
Contratante: Ney Valente					Contato :				Telef.: (11) 99647-1004		
Endereço: Rua Primeiro de março, 193- V. Clementino-SP					CEP: 4044040		Cidade/UF:		São Paulo-SP		
CPF/CNPJ: 698.516.208-82					E-mail : valenteney@gmail.com						
EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)											
Equipamento: Eletrocardiógrafo				Marca: Dixtal				Modelo: EP-3			
Nº Série: 70308004				Patrimônio:				Classe: I		Tipo: CF	
Metodo Utilizado:											
Conforme solicitado, nosso laboratório realizou calibração no equipamento acima onde foram realizados medições em três séries de três pontos (03 ciclos) pré determinados.											
PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :											
Analisador de segurança elétrica											
Marca: Fluke			Modelo: 601-Pro Series XL			Nº Serie: 9722028					
Certificado de calibração Nº: 400.17705/25						Data: 21/07/2025			Validade: 21/07/2026		
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.											
Termo Higrômetro											
Marca: Minipa			Modelo: MT-242			Nº Serie: Não consta					
Certificado de calibração nº: 400.17674/25						Data: 14/07/2025			Validade: 14/07/2026		
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.											
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO VAC (Rêde)											
L1(Fase)-Earth(Terra) VAC : 119.2 V											
L2(Neutro)-Earth(Terra) VAC : 0.1 V											
L1(Fase) - L2(Neutro) Volts VAC : 119.2 V											
Consumo de corrente (A) : 0.2 A											
Resistência ao terra de proteção (Corrente aplicada = 10A)											
Máximo admissível Ω			0,200			Aprovado					
Resistência encontrada Ω			0,196								
Isolação L1, L2-gabinete acima de XX Ω			(2)hms								
Isol. parte aplicada-gabinete acima deXX Ω			97.4								
CORRENTE DE FUGA P/GABINETE (µA)											
				Obtido		Máximo admissível					
Polaridade normal				0		100		Aprovado			
Neutro desligado				0		500		Aprovado			
Terra Desligado				12		500		Aprovado			
Polaridade reversa				0		100		Aprovado			
Neutro desligado				0		500		Aprovado			
Terra Desligado				11		500		Aprovado			
CORRENTE DE FUGA PARA O TERRA (µA)											
Polarid. Normal		2		Max. 500		Aprovado					
Sem L2(Neutro)		2		Max. 1000		Aprovado					
CORRENTE DE FUGA PARA O PACIENTE (µA)											
		Obtido		Máximo admissível							
Polaridade Normal		1		10		Aprovado					
Neutro desligado		1		50		Aprovado					
Terra desligado		1		50		Aprovado					
Polaridade reversa		1		10		Aprovado					
Neutro desligado		1		50		Aprovado					
Terra desligado		1		50		Aprovado					
REDE SOBRE PARTES APLICADAS (µA)											
Pol. isolação normal		Obtido		Máximo admissível							
Normal		13		50		Aprovado					
Reversa		14		50		Aprovado					
Normal		13		50		Aprovado					
Reversa		14		50		Aprovado					
CORRENTE AUXILIAR AO PACIENTE (µA)											
RA-Todos		RL-Todos		LA-Todos		LL-Todos		V1-V6-Todos			
Obtido		Máximo admissível		Obtido		Máximo admissível		Obtido		Máximo admissível	
Pol.Normal:		0 10		0 10		0 10		0 10		0 10	
Neutro desl.:		0 50		0 50		0 50		0 50		0 50	
Terra desl.:		0 50		0 50		0 50		0 50		0 50	
Pol.Reversa.:		0 10		0 10		0 10		0 10		0 10	
Neutro desl.:		0 50		0 50		0 50		0 50		0 50	
Terra desl.:		0 50		0 50		0 50		0 50		0 50	
APROVADO		APROVADO		APROVADO		APROVADO		APROVADO			
O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.											
Assinado de forma digital por THIAGO FERREIRA DA COSTA CPF-001.136.812-83 Dados: 2025.09.24 09:14:35 -03'00'											
Assinado de forma digital por THIAGO CICERO ALVES JOSE:33437389807 Dados: 2025.09.24 09:16:51 -03'00'											
Técnico executor Thiago Ferreira-CPF: 001136812-83											
Técnico responsável Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176											