

Relatório técnico

De Calibração

e

Seg. Elétrica

**RC-ECG-RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDÍOGRAFO**Nº **2601151427**

Data :	20/01/2026	Hora:	9:10	Sugestão próxima calibração:	20/01/2027
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecília - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	24 °C			Humidade relativa do ar:	51 %
Contratante:	Arkimedes Centro Medico Ltda			Contato :	
Endereço:	Av.Tiradentes 527-Centro-São Roque			CEP:	18130470
CPF/CNPJ:	27.776.696/0001-07			Cidade/UF:	São Paulo-SP
				E-mail :	daniela@arkimedes.com.br

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Eletrocardiógrafo	Marca:	Micromed	Modelo:	Wincardio Serial
Nº Série:	1375	Patrimônio:		Classe:	I
				Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :**Simulador de Eletrocardiograma**

Marca: R&D Mediq Modelo: Hand Sim - HS-14 Nº Serie: 9823049
Certificado de calibração Nº: 400.17708/25 Data: 21/07/2025 Validade: 21/07/2026
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

Termo Higrômetro

Marca: Minipa Modelo: MT-242 Nº Serie: Não consta
Certificado de calibração nº: 400.17674/25 Data: 14/07/2025 Validade: 14/07/2026
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

Amplitude (Medidas na derivação DIII do Equipamento sob ensaio) :	Esperado mm	Tolerância +ou- mm	Obtido mm	Situação
Função "D" do Simulador de ECG - Onda quadrada 1 mV 2 Hz :	10	1	10	Aprovado
Função "2" do Simulador de ECG - Sinal de ECG derivação DIII :	10	1	10	Aprovado

Frequência (Batimentos por minuto. bpm)	Esperado bpm	Tolerância %	Obtido bpm	Situação
Função "0" do simulador de ECG - Sinal de ECG 30 BPM :	30	5	30	Aprovado
Função "2" do simulador de ECG - Sinal de ECG 80 BPM :	80	5	80	Aprovado
Função "4" do simulador de ECG - Sinal de ECG 240 BPM :	240	5	240	Aprovado

Velocidade de registro :	Esperado mm	Tolerância %	Obtido mm	Situação
25 mm/seg. - Função "2" do Simulador (80BPM) ECG - 8 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado
50 mm/seg. - Função "0" do Simulador (30 BPM) ECG - 4 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Thiago Ferreira
da Costa
CPF-001.136.812-
83

Assinado de forma digital
por Thiago Ferreira da
Costa CPF-001.136.812-83
Dados: 2026.01.20
09:16:45 -03'00'

THIAGO CICERO
ALVES
JOSE:33437389
807

Assinado de forma digital
por THIAGO CICERO ALVES
JOSE:33437389807
Dados: 2026.01.20 09:16:54
-03'00'

Técnico executor

Thiago Ferreira-CPF: 001136812-83

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.

Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - 01238-010 - São Paulo - SP

www.cardioequipo.com.br - Telef.: (11) 2609-7848

CNPJ : 47.577.523/0001-69

Escopo de Calibração e Segurança Elétrica do Eletrocardiógrafo

1. Procedimentos de Calibração

A calibração verifica a precisão dos sinais registrados pelo eletrocardiógrafo e deve ser realizada periodicamente.

2. Parâmetros Verificados

- **Amplitude do sinal:** Verificação se 1 mV corresponde ao valor correto no traçado.
- **Frequência de resposta:** Teste da resposta do equipamento dentro da faixa de operação.
- **Velocidade do traçado:** Conferência das velocidades configuráveis, como 25 mm/s e 50 mm/s.
- **Verificação de ruído e interferência:** Teste para identificar ruídos que possam afetar a leitura.
- **Teste de integridade dos cabos e eletrodos:** Avaliação da continuidade e resistência elétrica dos acessórios.

3. Procedimentos de Segurança Elétrica

A segurança elétrica previne choques elétricos e interferências que possam comprometer a segurança do paciente e do operador.

4. Ensaios de Segurança Elétrica

- **Corrente de fuga para terra:** Medição para garantir que o equipamento não libera corrente perigosa.
- **Corrente de fuga para o paciente:** Verificação da segurança das derivações conectadas ao paciente.
- **Resistência de isolamento:** Teste da isolação entre os circuitos de entrada e o chassi.
- **Continuidade do aterramento:** Garantia de conexão segura ao aterramento.

5. Ferramentas e Equipamentos de Teste

- Simulador de ECG Digital
- Analisador de segurança elétrica

6. Periodicidade da Calibração e Testes de Segurança

- **Calibração:** Anualmente ou conforme necessidade.
- **Segurança elétrica:** A cada 12 meses ou após manutenção corretiva.

7. Registro e Certificação

Todos os testes devem ser documentados, e um certificado de calibração e laudo de segurança elétrica devem ser emitidos.

Relatório de Teste

Modelo: Wincardio Serial

Nro.de Série: 01375

Data 20/01/2026 9:10

PADRÃO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO


Calibrador de ECG marca R&D Mediq modelo HS-14 N° de série: 9823049

Certificado de calibração n°: 400.17708/25 / DATA: 21/07/2025 VALIDADE: 21/07/2026

CERTIFICADOR: CNCiso. Com.de Instrum. De Precisão Ltda.

Aplicada amplitude na derivação DIII do equipamento sob ensaio

Onda quadrada 1 mV 2 Hz

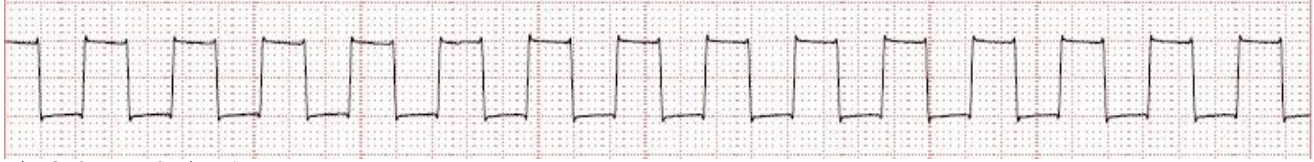

Sinal de ECG derivação DIII




Aplicada frequência (Batimentos por minuto. bpm) sob ensaio

Sinal de ECG 30 BPM



Sinal de ECG 80 BPM

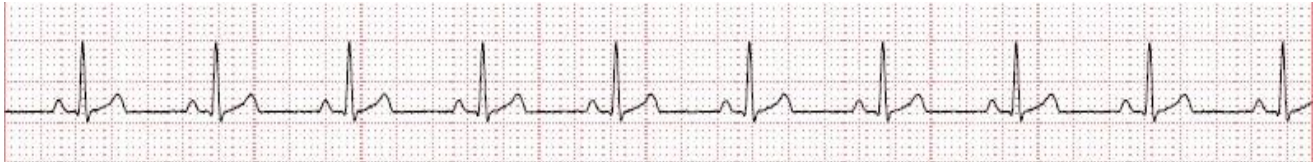


Sinal de ECG 240 BPM




Aplicado velocidade de registro sob ensaio

25 mm/seg. - 8 QRSs Sinal de ECG 80 BPM

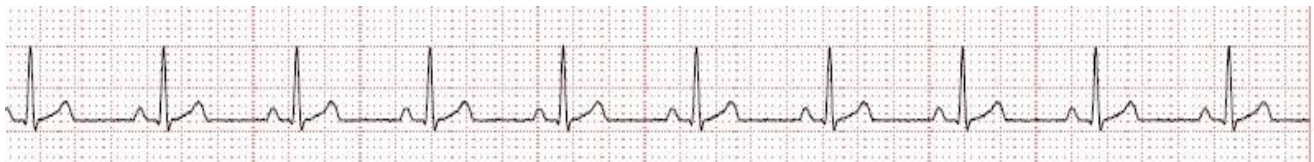

50 mm/seg. - 4 QRSs / Sinal de ECG 30 BPM

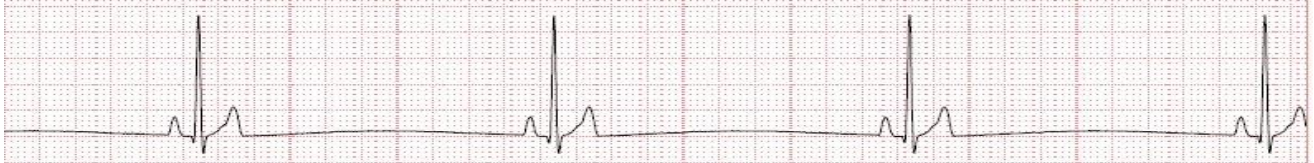

COMENTARIOS: REGISTROS APROVADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO FABRICANTE

CERTIFICADO DE SEGURANÇA ELÉTRICA				Nº 2601191427	
Data :	20/01/2026	Hora:	8:25	Sugestão próximo ensaio :	20/01/2027
Contratada: Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ: 47.577.523/0001-69		
Endereço: Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecília - S.Paulo / SP			Insc.Est.: 110.554.143.117		
Temperatura ambiente:		24 °C	Humidade relativa do ar:		51 %
Contratante: Arkimedes Centro Medico Ltda			Contato :		Telef.: 11-99263-4170
Endereço: Av.Tiradentes 527-Centro-São Roque			CEP:	18130470	Cidade/UF: São Roque-SP
CPF/CNPJ: 27.776.696/0001-07			E-mail: daniela@arkimedes.com.br		
EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)					
Equipamento: Eletrocardiógrafo		Marca:	Micromed	Modelo: Wincardio Serial	
Nº Série: 1375		Patrimônio:		Classe: I	Tipo: CF
Metodo Utilizado:					
Conforme solicitado, nosso laboratório realizou calibração no equipamento acima onde foram realizados medições em três séries de três pontos (03 ciclos) pré determinados.					
PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :					
Analisador de segurança elétrica					
Marca: Fluke		Modelo:	601-Pro Series XL	Nº Serie:	9722028
Certificado de calibração Nº:		400.17705/25	Data:	21/07/2025	Validade: 21/07/2026
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Termo Higrômetro					
Marca: Minipa		Modelo:	MT-242	Nº Serie:	Não consta
Certificado de calibração nº:		400.17674/25	Data:	14/07/2025	Validade: 14/07/2026
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO VAC (Rêde)			CORRENTE DE FUGA P/GABINETE (µA)		
L1(Fase)-Earth(Terra) VAC : 119.2 V			Obtido		
L2(Neutro)-Earth(Terra) VAC : 0.1 V			Máximo admissível		
L1(Fase) - L2(Neutro) Volts VAC : 119.2 V			Polaridade normal		
Consumo de corrente (A) : 0.2 A			0		
Resistência ao terra de proteção (Corrente aplicada = 10A)			100		
Máximo admissível Ω		0,200	Aprovado		
Resistência encontrada Ω		0,196	Neutro desligado		
Isolação L1, L2-gabinete acima de XX Ω		(2)hms	0		
Isol. parte aplicada-gabinete acima deXX Ω		91.1	500		
			Aprovado		
			Terra Desligado		
			10		
			500		
			Aprovado		
			Polaridade reversa		
			0		
			100		
			Aprovado		
			Neutro desligado		
			0		
			500		
			Aprovado		
			Terra Desligado		
			10		
			500		
			Aprovado		
CORRENTE DE FUGA PARA O TERRA (µA)					
Polarid. Normal	2	Max.	500	Aprovado	
Sem L2(Neutro)	2	Max.	1000	Aprovado	
CORRENTE DE FUGA PARA O PACIENTE (µA)			REDE SOBRE PARTES APLICADAS (µA)		
		Obtido	Máximo admissível		
Polaridade Normal	1	10	Aprovado	Pol. isolação normal	
Neutro desligado	1	50	Aprovado	Obtido	
Terra desligado	1	50	Aprovado	Normal	
Polaridade reversa	1	10	Aprovado	12	
Neutro desligado	1	50	Aprovado	50	
Terra desligado	1	50	Aprovado	Aprovado	
			Reversa		
			13		
			50		
			Aprovado		
			Normal		
			12		
			50		
			Aprovado		
			Reversa		
			13		
			50		
			Aprovado		
CORRENTE AUXILIAR AO PACIENTE (µA)					
RA-Todos		RL-Todos		LA-Todos	
Obtido		Máximo admissível		Obtido	
Máximo admissível		Obtido		Máximo admissível	
Pol.Normal:		0		10	
Neutro desl.:		0		50	
Terra desl.:		0		50	
Pol.Reversa.:		0		10	
Neutro desl.:		0		50	
Terra desl.:		0		50	
APROVADO		APROVADO		APROVADO	
LL-Todos		V1-V6-Todos			
Obtido		Máximo admissível		Obtido	
Máximo admissível		Obtido		Máximo admissível	
Pol.Normal:		0		10	
Neutro desl.:		0		50	
Terra desl.:		0		50	
Pol.Reversa.:		0		10	
Neutro desl.:		0		50	
Terra desl.:		0		50	
APROVADO		APROVADO		APROVADO	
O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.					
Thiago Ferreira da Costa CPF-001.136.812-83 Assinado de forma digital por Thiago Ferreira da Costa Dados: 2026.01.20 08:50:47 -03'00'			THIAGO CICERO ALVES JOSE:33437389807 Assinado de forma digital por THIAGO CICERO ALVES JOSE:33437389807 Dados: 2026.01.20 08:50:59 -03'00'		
Técnico executor Thiago Ferreira-CPF: 001136812-83			Técnico responsável Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176		