

Relatório técnico de calibração do Eletrocardiógrafo

Escopo de Calibração de Eletrocardiógrafos

A calibração de eletrocardiógrafos é um processo essencial para garantir a precisão e a confiabilidade dos registros de atividade elétrica do coração. Essa prática está regulamentada por normas técnicas que estabelecem critérios para verificação, ajustes e validação desses equipamentos, assegurando sua conformidade com padrões de desempenho e segurança. As principais diretrizes incluem:

1. Padrões de Referência:

- **Frequência de Calibração:**

- Recomenda-se que a calibração seja realizada periodicamente, geralmente anualmente, ou conforme indicado pelo fabricante, condições de uso e exigências de certificação.

- **Parâmetros Verificados:**

- **Ganho e sensibilidade:** Avaliação para garantir que os sinais elétricos do coração sejam amplificados e exibidos corretamente.
- **Velocidade do papel:** Verificação da precisão do registro em papel, geralmente ajustado para 25 mm/s ou 50 mm/s.
- **Linearidade do traçado:** Teste para evitar distorções na representação dos sinais elétricos.
- **Rejeição de ruídos:** Avaliação da capacidade de filtrar interferências, como ruídos de rede elétrica.

- **Equipamentos Utilizados na Calibração:**

- Calibradores de ECG ou simuladores de sinais fisiológicos, que geram traçados padrão para comparação com os registros do equipamento.

- **Documentação e Certificação:**

- Após a calibração, um laudo técnico deve ser emitido, contendo informações como data, parâmetros ajustados, equipamentos utilizados, e nome do responsável técnico.
- Esse documento pode ser exigido por órgãos de fiscalização, hospitais ou certificações de qualidade.

**RC-ECG-RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO**Nº **2608031706**

Data :	03/08/2026	Hora:		Sugestão próxima calibração:	03/08/2027
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	24	°C		Humidade relativa do ar:	51 %

Contratante:	Dino Oswaldo Zorzo		Contato :		Telef.:	(19) 99178-3358
Endereço:	Rua Bahia -777-Vila Cristóvam		CEP:	13480-520	Cidade/UF:	Limeira-SP
CPF/CNPJ:	145.366.096-87		E-mail :	dino.zorzo@gmail.com		

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Eletrocardiógrafo	Marca:	Micromed	Modelo:	Wincardio Serial
Nº Série:	407607	Patrimônio:		Classe:	I
				Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :**Simulador de Eletrocardiograma**

Marca: R&D Mediq Modelo: Hand Sim - HS-14 Nº Serie: 9823049
Certificado de calibração Nº: 400.17824/26 Data: 20/07/2026 Validade: 20/07/2027
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

Termo Higrômetro

Marca: Minipa Modelo: MT-242 Nº Serie: Não consta
Certificado de calibração nº: 400.17733/26 Data: 13/07/2026 Validade: 13/07/2027
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

Amplitude (Medidas na derivação DIII do Equipamento sob ensaio) :	Esperado mm	Tolerância +ou- mm	Obtido mm	Situação
Função "D" do Simulador de ECG - Onda quadrada 1 mV 2 Hz :	10	1	10	Aprovado
Função "2" do Simulador de ECG - Sinal de ECG derivação DIII :	10	1	10	Aprovado

Frequência (Batimentos por minuto. bpm)	Esperado bpm	Tolerância %	Obtido bpm	Situação
Função "0" do simulador de ECG - Sinal de ECG 30 BPM :	30	5	30	Aprovado
Função "2" do simulador de ECG - Sinal de ECG 80 BPM :	80	5	80	Aprovado
Função "4" do simulador de ECG - Sinal de ECG 240 BPM :	240	5	240	Aprovado

Velocidade de registro :	Esperado mm	Tolerância %	Obtido mm	Situação
25 mm/seg. - Função"2" do Simulador (80BPM) ECG - 8 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado
50 mm/seg. - Função"0" do Simulador (30 BPM) ECG - 4 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor

Thiago Ferreira-CPF: 001136812-83

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176

Relatório de Teste

Modelo: Wincardio serial

Nro.de Série: 0407607

Data 03/08/2026

PADRÃO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO

Calibrador de ECG marca R&D Mediq modelo HS-14 N° de série: 9823049


Certificado de calibração n°: 400.177824/26 / DATA: 20/07/2025

VALIDADE: 20/07/2026

CERTIFICADOR: CNCiso. Com.de Instrum. De Precisão Ltda.

Aplicada amplitude na derivação DIII do equipamento sob ensaio

Onda quadrada 1 mV 2 Hz

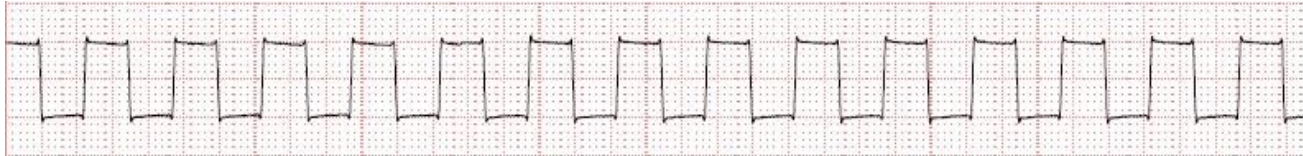

Sinal de ECG derivação DIII



Aplicada frequência (Batimentos por minuto. bpm) sob ensaio

Sinal de ECG 30 BPM



Sinal de ECG 80 BPM



Sinal de ECG 240 BPM




Aplicado velocidade de registro sob ensaio

25 mm/seg. - 8 QRSs Sinal de ECG 80 BPM



50 mm/seg. - 4 QRSs / Sinal de ECG 30 BPM

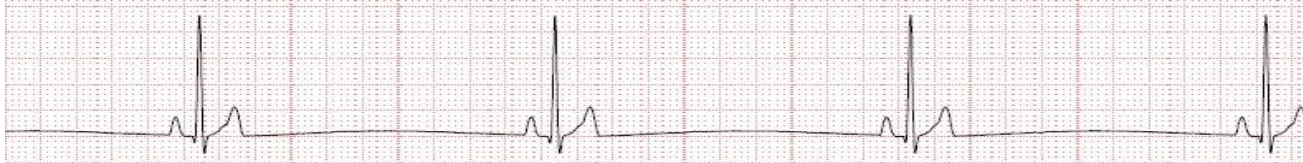

COMENTARIOS: REGISTROS APROVADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO FABRICANTE

CERTIFICADO DE SEGURANÇA ELÉTRICA				Nº 2608031706	
Data :	03/08/2026	Hora:		Sugestão próximo ensaio :	03/08/2027
Contratada: Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.		CNPJ:		47.577.523/0001-69	
Endereço:		Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecília - S.Paulo / SP		Insc.Est.: 110.554.143.117	
Temperatura ambiente:		24 °C		Humidade relativa do ar: 51 %	
Contratante: Dino Oswaldo Zorzo		Contato :		Telef.: (19) 99178-3358	
Endereço:		Rua Bahia - 777-Vila Cristóvam		CEP: 13480-520 Cidade/UF: Limeira-SP	
CPF/CNPJ:		145.366.096-87		E-mail: dino.zorzo@gmail.com	
EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)					
Equipamento: Eletrocardiógrafo		Marca: Micromed		Modelo: Wincardio Serial	
Nº Série: 407607		Patrimônio:		Classe: I Tipo: CF	
Método Utilizado:					
Conforme solicitado, nosso laboratório realizou calibração no equipamento acima onde foram realizadas medições em três séries de três pontos (03 ciclos) pré determinados.					
PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :					
Analisador de segurança elétrica					
Marca: Fluke		Modelo: 601-Pro Series XL		Nº Serie: 9722028	
Certificado de calibração Nº:		400.17820/26		Data: 20/07/2026 Validade: 20/07/2027	
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Termo Higrômetro					
Marca: Minipa		Modelo: MT-242		Nº Serie: Não consta	
Certificado de calibração nº:		400.17733/26		Data: 13/07/2026 Validade: 13/07/2027	
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO VAC (Rêde)			CORRENTE DE FUGA P/GABINETE (µA)		
L1(Fase)-Earth(Terra) VAC : 119.1 V			Obtido		
L2(Neutro)-Earth(Terra) VAC : 0.1 V			Máximo admissível		
L1(Fase) - L2(Neutro) Volts VAC : 118.8 V			Polaridade normal 0 100 Aprovado		
Consumo de corrente (A) : 0.1 A			Neutro desligado 0 500 Aprovado		
Resistência ao terra de proteção (Corrente aplicada = 10A)			Terra Desligado 10 500 Aprovado		
Máximo admissível Ω 0,200			Polaridade reversa 0 100 Aprovado		
Resistência encontrada Ω 0,196 Aprovado			Neutro desligado 0 500 Aprovado		
Isolação L1, L2-gabinete acima de XX Ω (2)hms			Terra Desligado 11 500 Aprovado		
Isol. parte aplicada-gabinete acima deXX Ω 10.5					
CORRENTE DE FUGA PARA O TERRA (µA)					
Polarid. Normal 1		Max. 500		Aprovado	
Sem L2(Neutro) 1		Max. 1000		Aprovado	
CORRENTE DE FUGA PARA O PACIENTE (µA)			REDE SOBRE PARTES APLICADAS (µA)		
Obtido		Máximo admissível		Pol. isolação normal	
Polaridade Normal 1		10 Aprovado		Obtido	
Neutro desligado 1		50 Aprovado		Normal 10 50 Aprovado	
Terra desligado 1		50 Aprovado		Reversa 8 50 Aprovado	
Polaridade reversa 1		10 Aprovado		Normal 10 50 Aprovado	
Neutro desligado 1		50 Aprovado		Reversa 8 50 Aprovado	
Terra desligado 1		50 Aprovado			
CORRENTE AUXILIAR AO PACIENTE (µA)					
RA-Todos		RL-Todos		LA-Todos	
Obtido Máximo admissível		Obtido Máximo admissível		Obtido Máximo admissível	
Pol.Normal: 0 10		0 10		0 10	
Neutro desl.: 0 50		0 50		0 50	
Terra desl.: 0 50		0 50		0 50	
Pol.Reversa.: 0 10		0 10		0 10	
Neutro desl.: 0 50		0 50		0 50	
Terra desl.: 0 50		0 50		0 50	
APROVADO		APROVADO		APROVADO	
LL-Todos		V1-V6-Todos			
Obtido Máximo admissível		Obtido Máximo admissível			
0 10		0 10			
0 50		0 50			
0 50		0 50			
0 10		0 10			
0 50		0 50			
0 50		0 50			
APROVADO		APROVADO			
O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.					
Técnico executor Thiago Ferreira-CPF: 001136812-83			Técnico responsável Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176		